



生物反馈电刺激治 疗仪 效果案例分析

广州圆爱康生物科技有限公司



目录 CONTENTS

01 临床患者案例

02 医院运营案例

临床患者案例-谢某某 治疗前后评估



让健康更简单一点！


治疗前
2023-05-12 12:53:18

盆底功能 评估报告

姓名 谢莹 性别 女 年龄 61 评估时间 2023-05-12 12:53:18

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.07	2-4 μ V
	变异性	0.12	< 0.2
快肌(II类肌)测试阶段	快速收缩时间	2.0	< 0.5s
	平均值	31.0	35-45 μ V
慢肌(I类肌)测试阶段	快速放松时间	2.03	< 0.5s
	平均值	19.24	30-40 μ V
耐力测试	变异性	0.32	< 0.2
	平均值	18.61	25-35 μ V
后静息阶段	变异性	0.24	< 0.2
	后10秒/前10秒比值	8.0	0.8-1.0
	平均值	2.24	2-4 μ V
	变异性	0.53	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

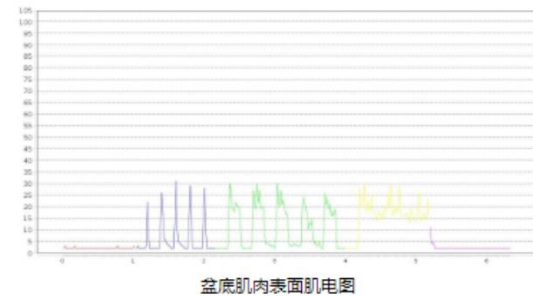

报告解读简要说明:

- 1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4 μ V且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快肌(II类肌)测试阶段: 测试快肌的功能。最大值过小, 提示肌力不足; 放松时间异常, 提示可能存在肌肉过度活跃。
- 3、慢肌(I类肌)测试阶段: 测试快慢肌的协调功能。平均值过小, 提示肌力不足; 变异系数异常, 提示肌肉稳定性差。


治疗后
2023-05-24 16:16:16

盆底功能 评估报告

姓名 谢莹 性别 女 年龄 61 评估时间 2023-05-24 16:16:16

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.22	2-4 μ V
	变异性	0.88	< 0.2
快肌(II类肌)测试阶段	快速收缩时间	2.0	< 0.5s
	平均值	49.0	35-45 μ V
慢肌(I类肌)测试阶段	快速放松时间	2.03	< 0.5s
	平均值	28.49	30-40 μ V
耐力测试	变异性	0.27	< 0.2
	平均值	26.92	25-35 μ V
后静息阶段	变异性	0.29	< 0.2
	后10秒/前10秒比值	8.44	0.8-1.0
	平均值	3.13	2-4 μ V
	变异性	0.46	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

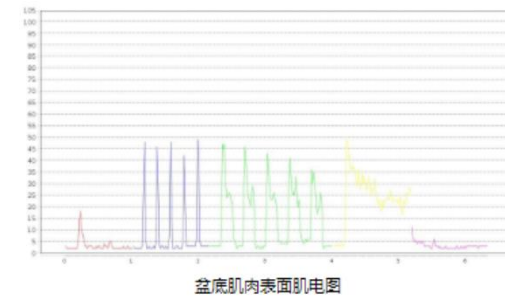

报告解读简要说明:

- 1、前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4 μ V且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快肌(II类肌)测试阶段: 测试快肌的功能。最大值过小, 提示肌力不足; 放松时间异常, 提示可能存在肌肉过度活跃。
- 3、慢肌(I类肌)测试阶段: 测试快慢肌的协调功能。平均值过小, 提示肌力不足; 变异系数异常, 提示肌肉稳定性差。

临床患者案例-谢某某 治疗记录



让健康更简单一点！

按医嘱，隔天治疗

序号	用户姓名	服务名称	治疗方案	治疗疗程	状态	开始时间	结束时间
1	谢某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 7 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-24 15:13:29	2023-05-24 16:08:38
2	谢某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 6 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-22 15:42:39	2023-05-22 16:37:49
3	谢某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 5 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-20 15:01:33	2023-05-20 15:56:43
4	谢某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 4 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-18 15:34:12	2023-05-18 16:29:22
5	谢某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 3 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-16 15:20:35	2023-05-16 16:16:35
6	谢某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 2 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-14 15:48:09	2023-05-14 16:43:18
7	谢某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 1 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-12 12:59:38	2023-05-12 13:59:04

临床患者案例-曾某某 治疗前后评估


治疗前
2023-05-05 21:18:47

盆底功能 评估报告

姓名 曾小 性别 女 年龄 28 评估时间 2023-05-05 21:18:47

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.92	2-4μV
	变异性	0.13	< 0.2
快肌(Ⅱ类肌)测试阶段	快速收缩时间	0.24	< 0.5s
	平均值	24.0	35-45μV
慢肌(Ⅰ类肌)测试阶段	快速放松时间	0.2	< 0.5s
	平均值	11.36	30-40μV
耐力测试	变异性	0.37	< 0.2
	平均值	8.16	25-35μV
后静息阶段	变异性	0.27	< 0.2
	后10秒/前10秒比值	1.57	0.8-1.0
	平均值	4.47	2-4μV
	变异性	0.16	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

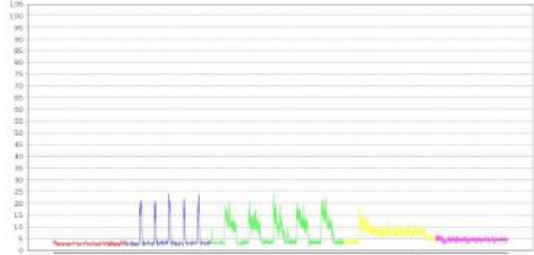

盆底肌肉表面肌电图

报告解读简要说明:

- 1、前静息阶段：测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快肌（Ⅱ类肌）测试阶段：测试快肌的功能。最大值过小，提示肌力不足；放松时间异常，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 3、慢肌（Ⅰ类肌）测试阶段：测试快慢肌的协调功能。平均值过小，提示肌力不足；变异系数异常，提示肌肉稳定性差。


治疗后
2023-05-22 21:45:36

盆底功能 评估报告

姓名 曾小 性别 女 年龄 28 评估时间 2023-05-22 21:45:36

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	3.83	2-4μV
	变异性	0.14	< 0.2
快肌(Ⅱ类肌)测试阶段	快速收缩时间	0.24	< 0.5s
	平均值	31.0	35-45μV
慢肌(Ⅰ类肌)测试阶段	快速放松时间	0.2	< 0.5s
	平均值	14.88	30-40μV
耐力测试	变异性	0.37	< 0.2
	平均值	15.47	25-35μV
	变异性	0.25	< 0.2
	后10秒/前10秒比值	1.72	0.8-1.0
后静息阶段	平均值	3.24	2-4μV
	变异性	0.15	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

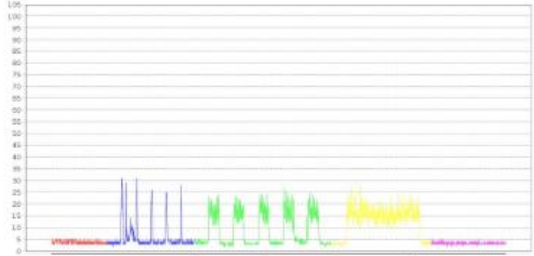

盆底肌肉表面肌电图

报告解读简要说明:

- 1、前静息阶段：测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快肌（Ⅱ类肌）测试阶段：测试快肌的功能。最大值过小，提示肌力不足；放松时间异常，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 3、慢肌（Ⅰ类肌）测试阶段：测试快慢肌的协调功能。平均值过小，提示肌力不足；变异系数异常，提示肌肉稳定性差。

临床患者案例-曾某某 治疗记录



让健康更简单一点！

序号	用户姓名	服务名称	治疗方案	治疗疗程	状态	开始时间	结束时间
1	曾某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 10 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-24 21:31:06	2023-05-24 22:21:18
2	曾小	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 9 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-22 20:34:59	2023-05-22 21:38:26
3	曾小	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 8 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-19 21:59:52	2023-05-20 22:47:21
4	曾小	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 7 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-18 21:24:47	2023-05-19 21:51:10
5	曾小	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 6 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-13 19:43:23	2023-05-13 20:33:39
6	曾小	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 5 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-11 19:39:01	2023-05-11 20:43:31
7	曾小	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 4 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-05 20:13:58	2023-05-05 21:11:40
8	曾小	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 3 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-04 21:03:45	2023-05-04 21:53:58
9	曾小	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 2 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-30 13:25:30	2023-05-04 21:02:45
10	曾小	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 1 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-30 12:29:13	2023-04-30 13:24:26

临床患者案例-陈某某 治疗前后评估




让健康更简单一点!

治疗前
2023-03-19 18:44:34

盆底功能 评估报告

姓名	陈某某	性别	女	年龄	32	评估时间	2023-03-19 18:44:34
阶段	指标		阶段测试值	参考值			
前静息阶段	平均值		4.08	2-4 μ V			
	变异性		0.28	< 0.2			
快肌(II类肌)测试阶段	快速收缩时间		0.2	< 0.5s			
	快速放松时间		0.2	< 0.5s			
慢肌(I类肌)测试阶段	平均值		6.38	30-40 μ V			
	变异性		0.35	< 0.2			
耐力测试	平均值		5.2	25-35 μ V			
	变异性		0.21	< 0.2			
后静息阶段	后10秒/前10秒比值		0.87	0.8-1.0			
	平均值		4.2	2-4 μ V			
	变异性		0.21	< 0.2			

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

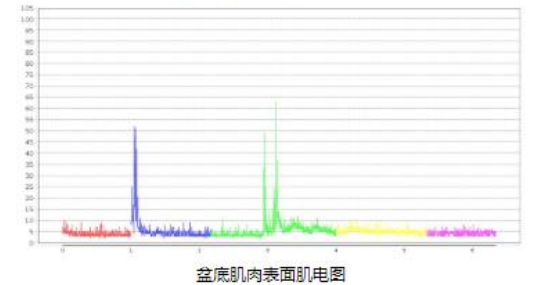

报告解读简要说明:


- 前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4 μ V且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。
- 快肌 (II类肌) 测试阶段: 测试快肌的功能。最大值过小, 提示肌力不足; 放松时间异常, 提示可能存在肌肉过度活跃。
- 慢肌 (I类肌) 测试阶段: 测试快慢肌的协调功能。平均值过小, 提示肌力不足; 变异性系数异常, 提示肌肉协调性差。

治疗后
2023-05-22 20:46:24

盆底功能 评估报告

姓名	陈某某	性别	女	年龄	32	评估时间	2023-05-22 20:46:24
阶段	指标	阶段测试值	参考值				
前静息阶段	平均值	4.77	2-4μV				
	变异性	0.24	< 0.2				
快肌(II类肌)测试阶段	快速收缩时间	0.2	< 0.5				
	快速放松时间	0.2	< 0.5				
慢肌(I类肌)测试阶段	平均值	11.45	30-40μV				
	变异性	0.26	< 0.2				
耐力测试	平均值	10.03	25-35μV				
	变异性	0.23	< 0.2				
后静息阶段	后10秒/前10秒比值	1.13	0.8-1.0				
	平均值	4.84	2-4μV				
	变异性	0.21	< 0.2				

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

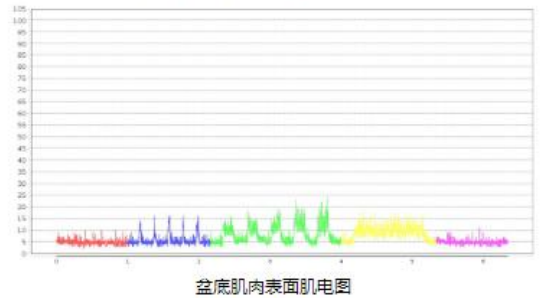

报告解读简要说明:

- 前静息阶段: 测试静息状态下的肌肉状态。大于4 μ V且变异系数大于参考值, 提示可能存在肌肉过度活跃。
- 快肌 (II类肌) 测试阶段: 测试快肌的功能。最大值过小, 提示肌力不足; 放松时间异常, 提示可能存在肌肉过度活跃。
- 慢肌 (I类肌) 测试阶段: 测试快慢肌的协调功能。平均值过小, 提示肌力不足; 变异性系数异常, 提示肌肉协调性差。

临床患者案例-陈某某 治疗记录



让健康更简单一点！

序号	用户姓名	服务名称	治疗方案	治疗行程	状态	开始时间	结束时间	
1	陈某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 10 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-22 20:47:10	2023-05-22 21:32:19	2
2	陈某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 9 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-18 21:39:27	2023-05-18 22:25:08	2
3	陈某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 8 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-15 21:15:15	2023-05-16 21:22:05	2
4	陈某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 7 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-13 21:46:04	2023-05-13 22:31:15	2
5	陈某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 6 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-09 18:01:09	2023-05-09 19:03:24	2
6	陈某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 5 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-07 22:18:49	2023-05-07 23:04:00	2
7	陈某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 4 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-05 22:23:03	2023-05-05 23:35:47	2
8	陈某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 3 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-25 13:56:05	2023-03-25 14:41:16	2
9	陈某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 2 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-22 16:33:53	2023-03-22 17:57:57	2
10	陈某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 1 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-19 18:59:50	2023-03-19 19:44:59	2

治疗前


2023-03-03 16:21:53

盆底功能 评估报告

姓名	左某某	性别	女	年龄	28	评估时间	2023-03-03 16:21:53
----	-----	----	---	----	----	------	---------------------

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	4.15	2-4μV
	变异性	0.39	< 0.2
快肌(II类肌)测试阶段	快速收缩时间	0.21	< 0.5s
	平均值	34.0	35-45μV
	快速放松时间	0.2	< 0.5s
慢肌(I类肌)测试阶段	平均值	10.35	30-40μV
	变异性	0.32	< 0.2
耐力测试	平均值	13.61	25-35μV
	变异性	0.32	< 0.2
	后10秒/前10秒比值	1.35	0.8-1.0
后静息阶段	平均值	4.17	2-4μV
	变异性	0.31	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

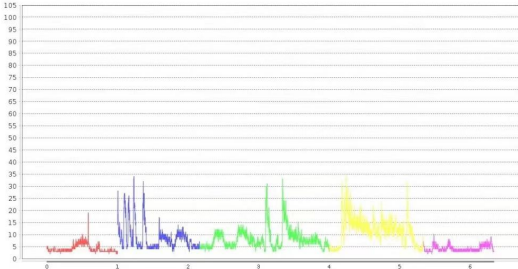

盆底肌肉表面肌电图

报告解读简要说明:

- 1、前静息阶段：测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快肌（II类肌）测试阶段：测试快肌的功能。最大值过小，提示肌力不足；放松时间异常，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 3、慢肌（II类肌）测试阶段：测试快慢肌的协调功能。平均值过小，提示肌力不足；变异系数异常，提示肌肉稳定性差。

第一个疗程结束时


2023-04-08 16:42:37

盆底功能 评估报告

姓名	左某某	性别	女	年龄	28	评估时间	2023-04-08 16:42:37
----	-----	----	---	----	----	------	---------------------

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.82	2-4μV
	变异性	0.14	< 0.2
快肌(II类肌)测试阶段	快速收缩时间	0.22	< 0.5s
	平均值	29.0	35-45μV
	快速放松时间	0.2	< 0.5s
慢肌(I类肌)测试阶段	平均值	17.2	30-40μV
	变异性	0.37	< 0.2
耐力测试	平均值	14.73	25-35μV
	变异性	0.29	< 0.2
	后10秒/前10秒比值	1.45	0.8-1.0
后静息阶段	平均值	2.58	2-4μV
	变异性	0.19	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

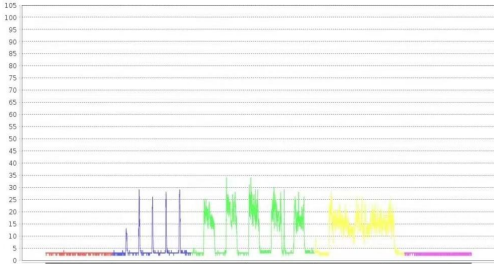

盆底肌肉表面肌电图

报告解读简要说明:

- 1、前静息阶段：测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快肌（II类肌）测试阶段：测试快肌的功能。最大值过小，提示肌力不足；放松时间异常，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 3、慢肌（II类肌）测试阶段：测试快慢肌的协调功能。平均值过小，提示肌力不足；变异系数异常，提示肌肉稳定性差。

治疗后


2023-05-06 11:09:13

盆底功能 评估报告

姓名	左某某	性别	女	年龄	28	评估时间	2023-05-06 11:09:13
----	-----	----	---	----	----	------	---------------------

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.52	2-4μV
	变异性	0.21	< 0.2
快肌(II类肌)测试阶段	快速收缩时间	0.19	< 0.5s
	平均值	30.0	35-45μV
	快速放松时间	0.2	< 0.5s
慢肌(I类肌)测试阶段	平均值	18.4	30-40μV
	变异性	0.4	< 0.2
耐力测试	平均值	16.49	25-35μV
	变异性	0.34	< 0.2
	后10秒/前10秒比值	1.4	0.8-1.0
后静息阶段	平均值	2.43	2-4μV
	变异性	0.2	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

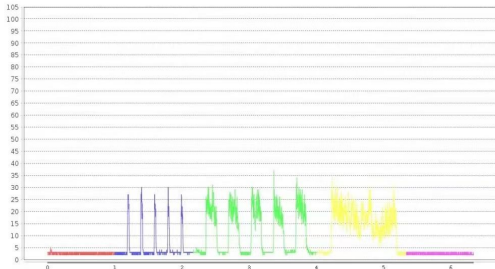

盆底肌肉表面肌电图

报告解读简要说明:

- 1、前静息阶段：测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快肌（II类肌）测试阶段：测试快肌的功能。最大值过小，提示肌力不足；放松时间异常，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 3、慢肌（II类肌）测试阶段：测试快慢肌的协调功能。平均值过小，提示肌力不足；变异系数异常，提示肌肉稳定性差。

临床患者案例-左某某 治疗记录



让健康更简单一点!

序号	用户姓名	服务名称	治疗方案	治疗行程	状态	开始时间	结束时间	状态时间
1	左某某	盆底康复	盆底康复 第3次 治疗方案	第 5 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-15 16:28:32	2023-05-15 17:22:13	2023-05-15 17:22:13
2	左某某	盆底康复	盆底康复 第3次 治疗方案	第 4 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-10 09:59:04	2023-05-10 10:50:33	2023-05-10 10:50:33
3	左某某	盆底康复	盆底康复 第3次 治疗方案	第 3 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-08 09:33:21	2023-05-08 10:23:29	2023-05-08 10:23:29
4	左某某	盆底康复	盆底康复 第3次 治疗方案	第 2 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-06 10:12:05	2023-05-06 11:02:15	2023-05-06 11:02:15
5	左某某	盆底康复	盆底康复 第3次 治疗方案	第 1 次疗程阶段	治疗完成	2023-05-04 16:07:28	2023-05-04 16:57:39	2023-05-04 16:57:38
6	左某某	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 10 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-29 21:50:23	2023-04-29 22:45:35	2023-04-29 22:45:35
7	左某某	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 9 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-26 20:54:43	2023-04-26 21:49:53	2023-04-26 21:49:53
8	左某某	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 8 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-24 21:29:19	2023-04-24 22:24:30	2023-04-24 22:24:29
9	左某某	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 7 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-22 22:01:01	2023-04-22 23:06:11	2023-04-22 23:06:11
10	左某某	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 6 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-20 21:40:52	2023-04-20 22:36:04	2023-04-20 22:36:04
11	左某某	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 5 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-17 20:50:49	2023-04-17 21:45:59	2023-04-17 21:45:59
12	左某某	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 4 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-15 17:30:40	2023-04-15 18:25:51	2023-04-15 18:25:51
13	左某某	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 3 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-13 21:28:13	2023-04-13 22:23:25	2023-04-13 22:23:25

临床患者案例-左某某 治疗记录



让健康更简单一点！

14	左	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 2 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-11 21:38:59	2023-04-11 22:34:11	2023-04-11 22:34:11
15	左	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 1 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-08 16:44:32	2023-04-08 17:39:44	2023-04-08 17:39:44
16	左	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 10 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-22 22:22:55	2023-03-22 23:22:06	2023-03-22 23:22:06
17	左	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 9 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-20 21:02:51	2023-03-20 21:53:03	2023-03-20 21:53:03
18	左	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 8 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-18 22:57:21	2023-03-18 23:50:49	2023-03-18 23:50:49
19	左	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 7 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-15 15:12:07	2023-03-15 16:02:17	2023-03-15 16:02:17
20	左	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 6 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-13 12:36:59	2023-03-13 13:29:22	2023-03-13 13:29:22
21	左	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 5 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-11 14:05:36	2023-03-11 14:55:47	2023-03-11 14:55:47
22	左	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 4 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-09 23:14:54	2023-03-10 00:05:05	2023-03-10 00:05:05
23	左	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 3 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-07 21:47:47	2023-03-07 22:33:08	2023-03-07 22:33:08
24	左	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 2 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-05 22:34:32	2023-03-05 23:19:44	2023-03-05 23:19:44
25	左	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 1 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-03 16:30:48	2023-03-03 17:28:06	2023-03-03 17:28:06

临床患者案例-杨某某 治疗前后评估

治疗前


2023-02-16 15:52:10

盆底功能 评估报告

姓名	杨	性别	女	年龄	29	评估时间	2023-02-16 12:52:10
----	---	----	---	----	----	------	---------------------

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	7.25	2-4μV
	变异性	0.12	< 0.2
快肌(II类肌)测试阶段	快速收缩时间	2.0	< 0.5s
	平均值	44.0	35-45μV
	快速放松时间	2.03	< 0.5s
慢肌(I类肌)测试阶段	平均值	26.18	30-40μV
	变异性	0.17	< 0.2
耐力测试	平均值	21.19	25-35μV
	变异性	0.16	< 0.2
	后10秒/前10秒比值	1.75	0.8-1.0
后静息阶段	平均值	7.32	2-4μV
	变异性	0.18	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

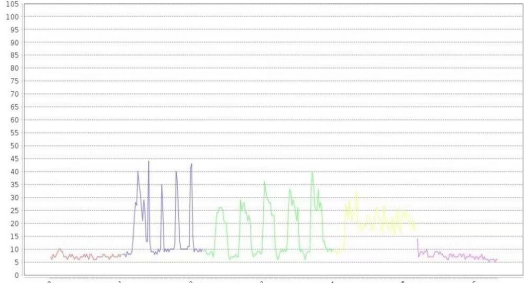

盆底肌肉表面肌电图

报告解读简要说明:

- 1、前静息阶段：测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快肌（II类肌）测试阶段：测试快肌的功能。最大值过小，提示肌力不足；放松时间异常，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 3、慢肌（II类肌）测试阶段：测试快慢肌的协调功能。平均值过小，提示肌力不足；变异系数异常，提示肌肉稳定性差。

治疗后


2023-03-6 16:57:40

盆底功能 评估报告

姓名	杨	性别	女	年龄	29	评估时间	2023-03-06 16:57:40
----	---	----	---	----	----	------	---------------------

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.05	2-4μV
	变异性	0.11	< 0.2
快肌(II类肌)测试阶段	快速收缩时间	0.0	< 0.5s
	平均值	60.0	35-45μV
	快速放松时间	2.03	< 0.5s
慢肌(I类肌)测试阶段	平均值	51.24	30-40μV
	变异性	0.19	< 0.2
耐力测试	平均值	55.56	25-35μV
	变异性	0.12	< 0.2
	后10秒/前10秒比值	28.64	0.8-1.0
后静息阶段	平均值	2.28	2-4μV
	变异性	0.54	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

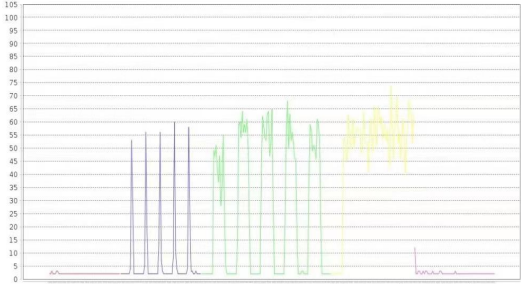

盆底肌肉表面肌电图

报告解读简要说明:

- 1、前静息阶段：测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快肌（II类肌）测试阶段：测试快肌的功能。最大值过小，提示肌力不足；放松时间异常，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 3、慢肌（II类肌）测试阶段：测试快慢肌的协调功能。平均值过小，提示肌力不足；变异系数异常，提示肌肉稳定性差。

临床患者案例-杨某某 治疗记录



让健康更简单一点！

序号	用户姓名	服务名称	治疗方案	治疗行程	状态	开始时间	结束时间	状态时间
1	杨某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 10 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-06 16:59:28	2023-03-06 17:39:37	2023-03-06 17:39:37
2	杨某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 9 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-04 12:53:43	2023-03-04 13:38:54	2023-03-04 13:38:54
3	杨某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 8 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-02 15:06:43	2023-03-02 15:46:53	2023-03-02 15:46:53
4	杨某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 7 次疗程阶段	治疗完成	2023-02-28 11:52:03	2023-02-28 12:32:12	2023-02-28 12:32:12
5	杨某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 6 次疗程阶段	治疗完成	2023-02-26 13:54:54	2023-02-26 14:35:05	2023-02-26 14:35:05
6	杨某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 5 次疗程阶段	治疗完成	2023-02-24 18:35:09	2023-02-24 19:15:19	2023-02-24 19:15:19
7	杨某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 4 次疗程阶段	治疗完成	2023-02-22 15:51:02	2023-02-22 16:31:12	2023-02-22 16:31:12
8	杨某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 3 次疗程阶段	治疗完成	2023-02-20 22:26:28	2023-02-20 23:19:09	2023-02-20 23:19:09
9	杨某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 2 次疗程阶段	治疗完成	2023-02-18 14:32:31	2023-02-18 15:17:57	2023-02-18 15:17:57
10	杨某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 1 次疗程阶段	治疗完成	2023-02-16 12:55:17	2023-02-16 13:35:27	2023-02-16 13:35:27

临床患者案例-陆某某 治疗前后评估



让健康更简单一点！


治疗前
2023-02-16 20:19:03

盆底功能 评估报告

姓名	陆某某	性别	女	年龄	0	评估时间	2023-02-16 20:19:03
----	-----	----	---	----	---	------	---------------------

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.96	2-4μV
	变异性	0.13	< 0.2
快肌(II类肌)测试阶段	快速收缩时间	0.2	< 0.5s
	平均值	8.0	35-45μV
	快速放松时间	0.2	< 0.5s
慢肌(I类肌)测试阶段	平均值	3.9	30-40μV
	变异性	0.22	< 0.2
耐力测试	平均值	3.92	25-35μV
	变异性	0.19	< 0.2
	后10秒/前10秒比值	1.04	0.8-1.0
后静息阶段	平均值	3.27	2-4μV
	变异性	0.15	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

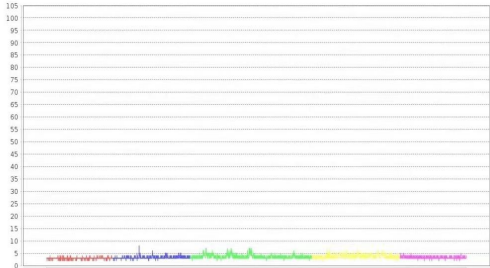

盆底肌肉表面肌电图

报告解读简要说明:

- 1、前静息阶段：测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快肌（II类肌）测试阶段：测试快肌的功能。最大值过小，提示肌力不足；放松时间异常，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 3、慢肌（II类肌）测试阶段：测试快慢肌的协调功能。平均值过小，提示肌力不足；变异系数异常，提示肌肉稳定性差。


疗程中
2023-03-16 21:22:23

盆底功能 评估报告

姓名	陆某某	性别	女	年龄	0	评估时间	2023-03-16 21:22:23
----	-----	----	---	----	---	------	---------------------

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.99	2-4μV
	变异性	0.46	< 0.2
快肌(II类肌)测试阶段	快速收缩时间	0.2	< 0.5s
	平均值	13.0	35-45μV
	快速放松时间	0.2	< 0.5s
慢肌(I类肌)测试阶段	平均值	3.74	30-40μV
	变异性	0.25	< 0.2
耐力测试	平均值	4.9	25-35μV
	变异性	0.25	< 0.2
	后10秒/前10秒比值	1.2	0.8-1.0
后静息阶段	平均值	2.82	2-4μV
	变异性	0.14	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

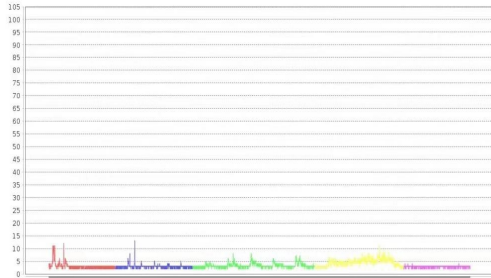

盆底肌肉表面肌电图

报告解读简要说明:

- 1、前静息阶段：测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快肌（II类肌）测试阶段：测试快肌的功能。最大值过小，提示肌力不足；放松时间异常，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 3、慢肌（II类肌）测试阶段：测试快慢肌的协调功能。平均值过小，提示肌力不足；变异系数异常，提示肌肉稳定性差。


治疗后
2023-04-15 08:43:28

盆底功能 评估报告

姓名	陆某某	性别	女	年龄	0	评估时间	2023-04-15 08:43:28
----	-----	----	---	----	---	------	---------------------

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	2.59	2-4μV
	变异性	0.24	< 0.2
快肌(II类肌)测试阶段	快速收缩时间	0.2	< 0.5s
	平均值	14.0	35-45μV
	快速放松时间	0.2	< 0.5s
慢肌(I类肌)测试阶段	平均值	3.7	30-40μV
	变异性	0.42	< 0.2
耐力测试	平均值	4.26	25-35μV
	变异性	0.24	< 0.2
	后10秒/前10秒比值	1.07	0.8-1.0
后静息阶段	平均值	2.95	2-4μV
	变异性	0.13	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

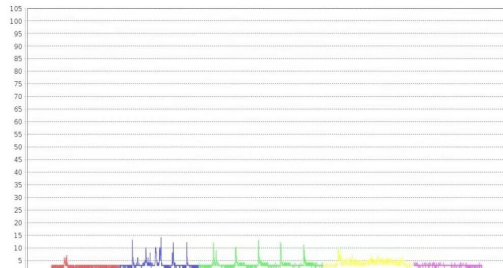

盆底肌肉表面肌电图

报告解读简要说明:

- 1、前静息阶段：测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快肌（II类肌）测试阶段：测试快肌的功能。最大值过小，提示肌力不足；放松时间异常，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 3、慢肌（II类肌）测试阶段：测试快慢肌的协调功能。平均值过小，提示肌力不足；变异系数异常，提示肌肉稳定性差。

临床患者案例-陆某某 治疗记录



让健康更简单一点!

序号	用户姓名	服务名称	治疗方案	治疗疗程	状态	开始时间	结束时间	状态时间
1	陆	盆底康复	盆底康复 第5次 治疗方案	第 10 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-15 08:45:33	2023-04-15 09:40:45	2023-04-15 09:40:45
2	陆	盆底康复	盆底康复 第5次 治疗方案	第 9 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-13 21:04:34	2023-04-13 21:59:45	2023-04-13 21:59:44
3	陆	盆底康复	盆底康复 第5次 治疗方案	第 8 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-11 10:21:29	2023-04-11 11:16:41	2023-04-11 11:16:41
4	陆	盆底康复	盆底康复 第5次 治疗方案	第 7 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-09 17:02:38	2023-04-09 17:57:50	2023-04-09 17:57:50
5	陆	盆底康复	盆底康复 第5次 治疗方案	第 6 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-07 16:58:05	2023-04-07 17:53:18	2023-04-07 17:53:18
6	陆	盆底康复	盆底康复 第5次 治疗方案	第 5 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-05 09:51:41	2023-04-05 10:46:55	2023-04-05 10:46:55
7	陆	盆底康复	盆底康复 第5次 治疗方案	第 4 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-03 11:34:28	2023-04-03 12:29:41	2023-04-03 12:29:41
8	陆	盆底康复	盆底康复 第5次 治疗方案	第 3 次疗程阶段	治疗完成	2023-04-01 11:15:26	2023-04-01 12:10:39	2023-04-01 12:10:39
9	陆	盆底康复	盆底康复 第5次 治疗方案	第 2 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-30 17:35:35	2023-03-30 18:30:47	2023-03-30 18:30:47
10	陆	盆底康复	盆底康复 第5次 治疗方案	第 1 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-28 13:15:25	2023-03-28 14:10:38	2023-03-28 14:10:38
11	陆	盆底康复	盆底康复 第4次 治疗方案	第 1 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-26 14:54:50	2023-03-26 15:50:01	2023-03-26 15:50:01
12	陆	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 9 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-24 14:02:03	2023-03-24 14:52:15	2023-03-24 14:52:15
13	陆	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 8 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-22 10:17:56	2023-03-22 11:13:08	2023-03-22 11:13:08

激活 Wind
转到“设置”以

临床患者案例-陆某某 治疗记录



让健康更简单一点!

14	陆	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 7 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-20 18:00:16	2023-03-20 18:50:30	2023-03-20 18:50:30
15	陆	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 6 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-18 08:06:53	2023-03-18 20:04:12	2023-03-18 20:04:12
16	陆	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 5 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-16 21:23:14	2023-03-16 22:13:27	2023-03-16 22:13:27
17	陆	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 4 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-14 10:16:28	2023-03-14 11:06:40	2023-03-14 11:06:40
18	陆	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 3 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-12 11:49:29	2023-03-12 12:39:41	2023-03-12 12:39:41
19	陆	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 2 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-10 16:09:15	2023-03-10 16:59:27	2023-03-10 16:59:27
20	陆	盆底康复	盆底康复 第2次 治疗方案	第 1 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-08 12:19:44	2023-03-08 13:09:59	2023-03-08 13:09:59
21	陆	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 10 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-06 11:09:53	2023-03-06 13:21:18	2023-03-06 13:21:18
22	陆	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 9 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-04 10:17:53	2023-03-04 15:02:14	2023-03-04 15:02:14
23	陆	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 8 次疗程阶段	治疗完成	2023-03-02 14:27:04	2023-03-02 15:22:17	2023-03-02 15:22:17
24	陆	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 7 次疗程阶段	治疗完成	2023-02-28 12:08:30	2023-02-28 12:58:40	2023-02-28 12:58:40
25	陆	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 6 次疗程阶段	治疗完成	2023-02-26 15:26:26	2023-02-26 16:16:37	2023-02-26 16:16:37
26	陆	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 5 次疗程阶段	治疗完成	2023-02-24 18:49:52	2023-02-24 19:40:08	2023-02-24 19:40:08
27	陆	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 4 次疗程阶段	治疗完成	2023-02-22 10:37:25	2023-02-22 11:22:37	2023-02-22 11:22:37
28	陆	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 3 次疗程阶段	治疗完成	2023-02-20 11:10:57	2023-02-20 11:56:11	2023-02-20 11:56:10
29	陆	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 2 次疗程阶段	治疗完成	2023-02-18 19:57:42	2023-02-19 20:06:12	2023-02-19 20:06:12
30	陆	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 1 次疗程阶段	治疗完成	2023-02-16 17:10:03	2023-02-16 20:47:04	2023-02-16 20:47:04

临床患者案例-潘某某 治疗前后评估


治疗前
2022-11-11 22:56:45

盆底功能 评估报告

姓名	潘某某	性别	女	年龄	32	评估时间	2022-11-16 22:56:45
----	-----	----	---	----	----	------	---------------------

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	11.5	2-4μV
	变异性	0.09	< 0.2
快肌(II类肌)测试阶段	快速收缩时间	0.0	< 0.5s
	平均值	14.0	35-45μV
	快速放松时间	0.2	< 0.5s
慢肌(I类肌)测试阶段	平均值	11.45	30-40μV
	变异性	0.08	< 0.2
耐力测试	平均值	11.38	25-35μV
	变异性	0.09	< 0.2
	后10秒/前10秒比值	0.98	0.8-1.0
后静息阶段	平均值	11.37	2-4μV
	变异性	0.09	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

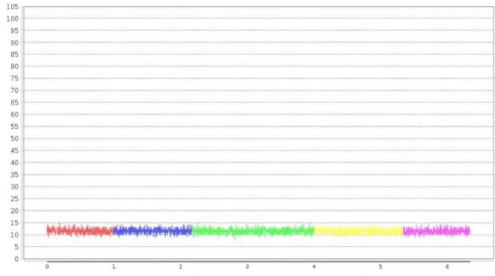

盆底肌肉表面肌电图

报告解读简要说明:

- 1、前静息阶段：测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快肌（II类肌）测试阶段：测试快肌的功能。最大值过小，提示肌力不足；放松时间异常，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 3、慢肌（II类肌）测试阶段：测试快慢肌的协调功能。平均值过小，提示肌力不足；变异系数异常，提示肌肉稳定性差。
- 4、耐力测试：测试慢肌的功能。前后平均值相差过大，提示慢肌耐力较差。
- 5、后静息阶段：测试一系列动作后，肌肉是否恢复正常状态。大于4μV且变异系数大于参考值，提示可能存在肌肉过度活跃。


治疗后
2022-12-12 22:45:49

盆底功能 评估报告

姓名	潘某某	性别	女	年龄	32	评估时间	2022-12-12 22:45:49
----	-----	----	---	----	----	------	---------------------

阶段	指标	阶段测试值	参考值
前静息阶段	平均值	7.46	2-4μV
	变异性	1.41	< 0.2
快肌(II类肌)测试阶段	快速收缩时间	0.2	< 0.5s
	平均值	51.0	35-45μV
	快速放松时间	0.2	< 0.5s
慢肌(I类肌)测试阶段	平均值	29.54	30-40μV
	变异性	0.37	< 0.2
耐力测试	平均值	27.37	25-35μV
	变异性	0.22	< 0.2
	后10秒/前10秒比值	1.58	0.8-1.0
后静息阶段	平均值	5.02	2-4μV
	变异性	0.29	< 0.2

红色:高于参考值, 黑色:黑色在参考值范围内, 蓝色:低于参考值

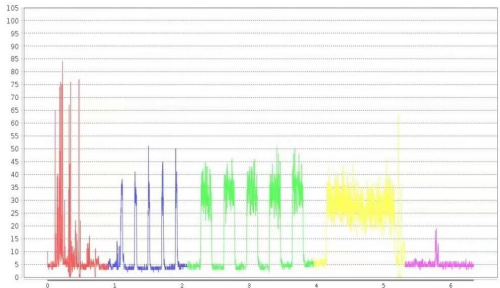

盆底肌肉表面肌电图

报告解读简要说明:

- 1、前静息阶段：测试静息状态下的肌肉状态。大于4μV且变异系数大于参考值，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 2、快肌（II类肌）测试阶段：测试快肌的功能。最大值过小，提示肌力不足；放松时间异常，提示可能存在肌肉过度活跃。
- 3、慢肌（II类肌）测试阶段：测试快慢肌的协调功能。平均值过小，提示肌力不足；变异系数异常，提示肌肉稳定性差。

临床患者案例-潘某某 治疗记录



让健康更简单一点！

序号	用户姓名	服务名称	治疗方案	治疗疗程	状态	开始时间	结束时间	状态时间
1	潘某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 10 次疗程阶段	治疗完成	2022-12-12 22:46:56	2022-12-12 23:20:59	2022-12-12 23:20:59
2	潘某某	子宫复旧	子宫复旧 第1次 治疗方案	第 1 次疗程阶段	治疗中	2022-12-10 23:33:34		2022-11-14 22:51:24
3	潘某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 9 次疗程阶段	治疗完成	2022-12-10 23:02:27	2022-12-10 23:32:35	2022-12-10 23:32:35
4	潘某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 8 次疗程阶段	治疗完成	2022-12-08 22:48:10	2022-12-08 23:18:17	2022-12-08 23:18:17
5	潘某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 7 次疗程阶段	治疗完成	2022-11-29 23:26:47	2022-11-29 23:56:54	2022-11-29 23:56:54
6	潘某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 6 次疗程阶段	治疗完成	2022-11-27 22:36:14	2022-11-27 23:06:20	2022-11-27 23:06:20
7	潘某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 5 次疗程阶段	治疗完成	2022-11-19 22:25:59	2022-11-19 22:56:17	2022-11-19 22:56:17
8	潘某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 4 次疗程阶段	治疗完成	2022-11-17 22:31:07	2022-11-17 23:01:13	2022-11-17 23:01:13
9	潘某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 3 次疗程阶段	治疗完成	2022-11-15 22:25:19	2022-11-15 22:55:26	2022-11-15 22:55:26
10	潘某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 2 次疗程阶段	治疗完成	2022-11-13 23:20:37	2022-11-13 23:40:41	2022-11-13 23:40:41
11	潘某某	盆底康复	盆底康复 第1次 治疗方案	第 1 次疗程阶段	治疗完成	2022-11-11 21:50:00	2022-11-11 22:35:11	2022-11-11 22:35:11

临床患者案例-纪某某 治疗记录




让健康更简单一点！


序号	用户姓名	服务名称	治疗方案	治疗疗程	状态	开始时间	结束时间	状态时间
1	纪	尿失禁	尿失禁 第1次 治疗方案	第 10 次疗程阶段	治疗完成	2022-12-30 00:13:09	2022-12-30 00:48:15	2022-12-30 00:48:15
2	纪	尿失禁	尿失禁 第1次 治疗方案	第 9 次疗程阶段	治疗完成	2022-12-26 23:46:58	2022-12-27 00:23:53	2022-12-27 00:23:53
3	纪	尿失禁	尿失禁 第1次 治疗方案	第 8 次疗程阶段	治疗完成	2022-12-17 00:44:18	2022-12-17 01:36:34	2022-12-17 01:36:34
4	纪	尿失禁	尿失禁 第1次 治疗方案	第 7 次疗程阶段	治疗完成	2022-12-15 00:07:09	2022-12-15 01:04:54	2022-12-15 01:04:54
5	纪	尿失禁	尿失禁 第1次 治疗方案	第 6 次疗程阶段	治疗完成	2022-12-12 23:16:52	2022-12-13 00:23:40	2022-12-13 00:23:40
6	纪	尿失禁	尿失禁 第1次 治疗方案	第 5 次疗程阶段	治疗完成	2022-12-06 23:38:41	2022-12-07 00:13:48	2022-12-07 00:13:48
7	纪	尿失禁	尿失禁 第1次 治疗方案	第 4 次疗程阶段	治疗完成	2022-12-05 00:57:24	2022-12-05 01:33:23	2022-12-05 01:33:23
8	纪	尿失禁	尿失禁 第1次 治疗方案	第 3 次疗程阶段	治疗完成	2022-12-02 23:57:26	2022-12-03 00:37:01	2022-12-03 00:37:01
9	纪	尿失禁	尿失禁 第1次 治疗方案	第 2 次疗程阶段	治疗完成	2022-11-30 15:33:13	2022-11-30 16:08:20	2022-11-30 16:08:20
10	纪	尿失禁	尿失禁 第1次 治疗方案	第 1 次疗程阶段	治疗完成	2022-11-27 14:16:05	2022-11-27 14:46:10	2022-11-27 14:46:10

医院运营案例


202211

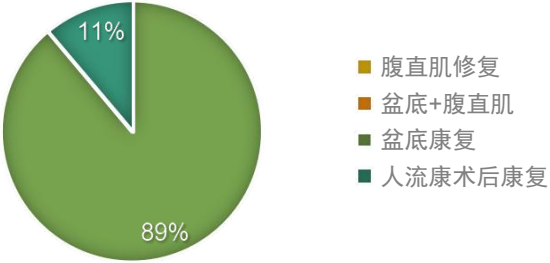


202212

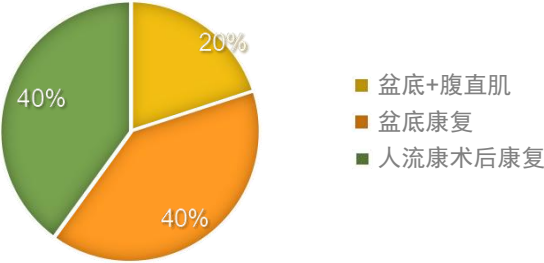


202301

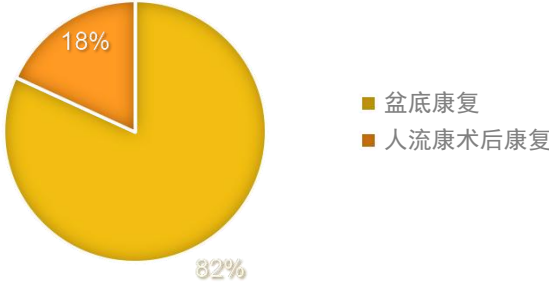


202302

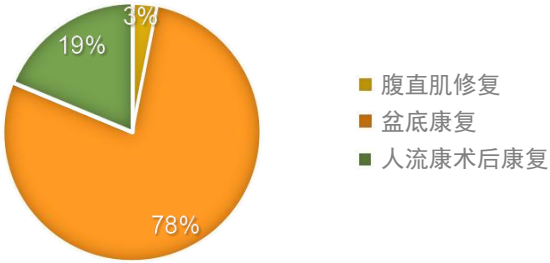

202303

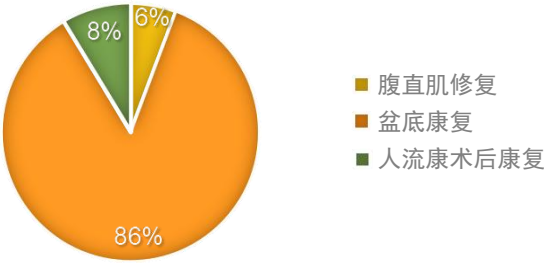

202304

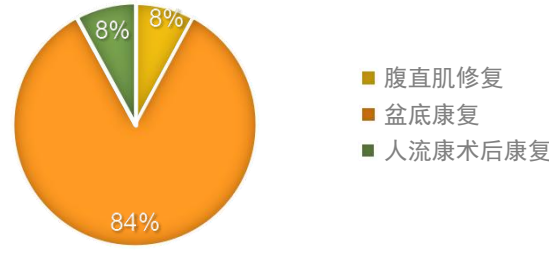

复购率

31%

2次疗程以上治疗



感谢观看

THANK YOU

广州圆爱康生物科技有限公司

