

永磁旋振治疗仪 产品培训



市场部

时间：2026-1-6

目录 CONTENT

1

基本信息

产品信息、适应症及适用科室、作用机制、禁忌症

2

产品详情

技术原理、装机视频、产品对比

3

操作视频

4

其他相关内容

配置清单、产品文献、收费建议

PART

01



基本信息

- 产品信息
- 适应症及适用科室
- 作用机制
- 禁忌症

永磁旋振治疗仪 (XSCX-I)

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：津械注准 20252090167

注册人名称	天津市顺博医疗设备有限公司
注册人住所	天津市红桥区湘潭道 23 号 B 座三层
生产地址	天津市滨海新区华苑产业区(环外)海泰发展三道 18 号 C 座 102
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	永磁旋振治疗仪
型号、规格	XSCX- I
结构及组成	产品由主机、磁振治疗头、旋磁振治疗头、治疗头连接 接线、电源线、应用软件组成。
适用范围	产品适用于盆腔炎的辅助治疗。
附件	产品技术要求
其他内容	无
备注	无

审批部门：天津市药品监督管理局

批准日期：2025 年 06 月 04 日

生效日期：2025 年 06 月 04 日

有效期至：2030 年 06 月 03 日

(审批部门盖章)

预期用途:产品适用于**盆腔炎**的
辅助治疗



国内第二家 (II类 注册证)

盆腔炎---概述、临表

概述

盆腔炎（PID）：女性上生殖道器官及其周围组织（子宫、输卵管、卵巢及盆腔腹膜）的**炎症**

临表

下腹痛、发热、异常阴道分泌物或异常阴道出血等状况

盆腔炎的相关疾病	
主要相关 疾病	子宫内膜炎
	输卵管炎
	盆腔腹膜炎
	输卵管卵巢脓肿
相关症状	输卵管管壁增厚
	管腔积液
	输卵管水肿或浆膜层有脓性渗出物
	下腹痛
	阴道分泌物异常

适用场景：

- 妇科
- 康复科
- 产后康复科
- 私人门诊或机构等

其他适应症建议：

- 止泻（磁疗治疗作用）
- 尿潴留
- 痛经所致疼痛的缓解
- 促进子宫复旧等

盆腔炎---病因、治疗

病因

主要是微生物从阴道和宫颈**上行感染**至子宫内膜和输卵管导致的。淋球菌、沙眼衣原体也是常见病因。

治疗

药物治疗、手术治疗、中医中药及**物理治疗**等

永磁的治疗作用

不同治疗头产生的物理因子，作用于盆腔附件及相关腧穴，产生一系列作用：

- 磁场可改变**组织通透性**
- 磁场可以抑制炎症、减少渗出
- 干扰生物体内的**神经元信号传导**
- 振动可**激活神经元**



作用机制

镇痛

机制：

- 改善循环，给予组织营养，纠正致痛物质聚集
- 提高致痛物质水解酶的活性，加速致痛物质水解
- 促进镇痛物质分泌，提高痛阈

消炎消肿

机制：

- 改善循环，增加组织通透性，炎性产物及时排出
- 抑制炎症作用 ②
- 提高酶的活性，降低致炎物质浓度，改善病理过程

禁忌症



恶性肿瘤者



发烧或感染



孕期及哺乳期



儿童



心脏起搏器



局部金属异物

2.4 禁忌症:

- 1) 月经期间禁用旋磁振治疗头治疗。
- 2) 急性盆腔炎和慢性盆腔炎急性发作期禁用。
- 3) 结核病活动期禁用。
- 4) 装有心脏起搏器，心脏植入支架或较严重心脏病的患者禁用。
- 5) 有腹部出血性疾病以及腹壁血栓病人不建议使用本治疗仪。
- 6) 收缩压低于 90mmHg 和（或）舒张压低于 60mmHg 的患者谨慎使用本治疗仪。
- 7) 金属异物局部；
- 8) 严重的心、肝、肺、肾衰竭的患者；
- 9) 出血及有出血倾向者；
- 10) 妊娠期、哺乳期患者禁用；
- 11) 对磁疗有明显不良反应者；
- 12) 体质极度虚弱者；
- 13) 临床试验中提出的其他禁忌症；
- 14) 癫痫，精神障碍疾病患者；
- 15) 儿童；
- 16) 以下人群应考虑慎用本产品：
 - (1) 身体植入金属的患者；
 - (2) 恶性肿瘤患者；
 - (3) 开放性伤口；
 - (4) 血管性栓塞者；
 - (5) 白细胞低下者。

按照说明书进行规范操作

PART

02



产品详情

- 技术原理
- 产品对比

永磁技术原理

两种技术的结合

1. 永磁体技术---产生稳定磁场
2. 机械振动技术---振动按摩




永磁体的技术原理及特点


	永磁体（硬磁）	电磁体（软磁）
原理	经过外加磁场磁化再去掉外磁场以后能长时期保留较高剩余磁性	外加磁场
特性	可以长时期保留较高剩余磁性, 并能经受外加磁场和其他环境因素的干扰。能经受外加磁场的干扰, 又称硬磁材料。	既容易受外加磁场磁化, 又容易退磁, 这样的材料称为软磁材料
矫顽力	高	低
磁场特点	具有高稳定性：即外加干扰磁场、温度和震动等环境因素变化对永磁几乎无影响	不稳定，容易被环境等影响，易磁化或退磁

性能：更稳定

永磁体的技术原理及特点

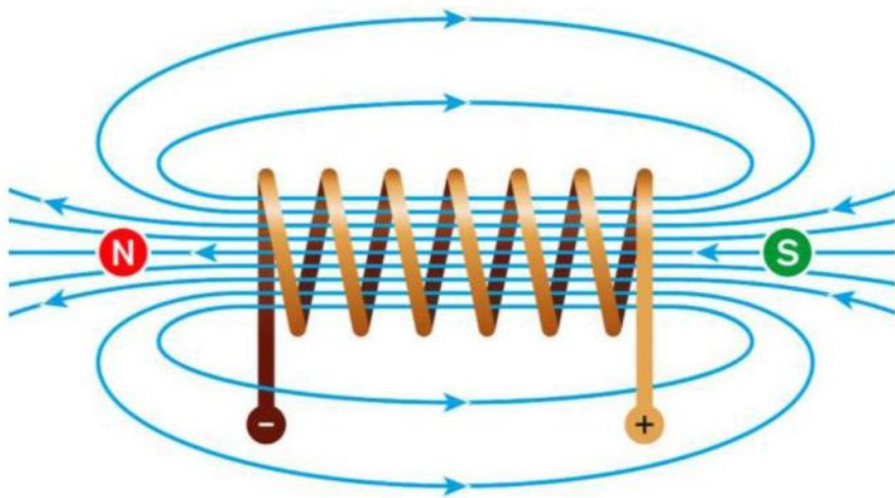

恒定磁场

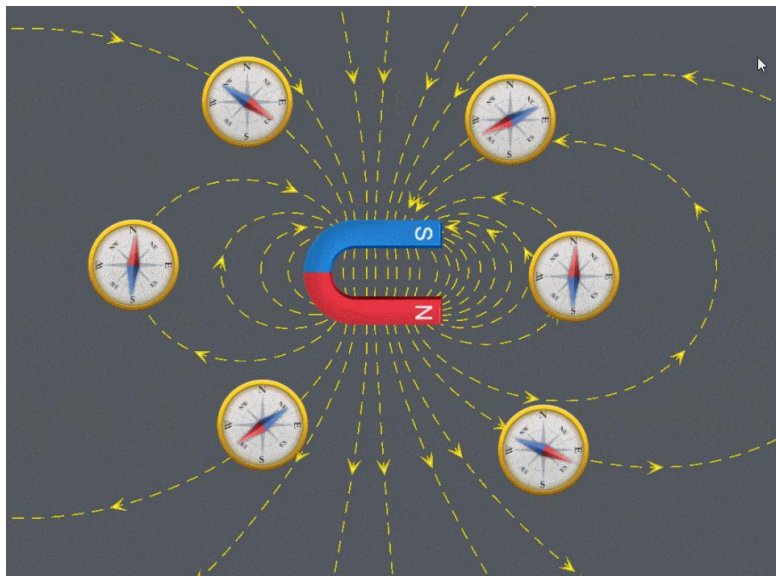

动磁场

三种治疗模式		
	腹部治疗头	腔内治疗头
模式一	三个振子同时连续振动	连续振动
模式二	振动时间：2s为一个周期 振动方式：振子以（两振，一停）的方式，三个振子依次循环	时间：以8s（振6，停2）为一个周期振动
模式三	振动时间：2s为一个周期 振动方式：振子以（一振，两停）的方式，三个振子依次循环	以1.5（振1，停0.5）为一个周期振动



模式二、三
治疗头振动顺序

我们有三种不同的治疗模式可选：

于患者而言可以更有针对性，可以为患者选择更适合的治疗模式。一些比较敏感或者没进行过盆底治疗的患者，建议从 3 模式开始进行，逐渐过度到 2 模式或 1 模式。之前进行过盆底治疗的患者或是相对不敏感的患者，可直接进行 2 模式或 1 模式的治疗。

主要技术参数	XSCX- I	RHY-ZX-III B/立式(普通版)	偏离情况
输入电源	220V, 50Hz	220V±22V, 50Hz±1Hz	无偏离
功率消耗	≤48VA	≤58VA	正偏离
环境条件	温度5℃~35℃, 湿度≤80%, 大气压力范围70kPa~106kPa;	5℃~40℃; 相对湿度: 10%~ 90%	无偏离
结构组成	由主机、磁振治疗头、旋磁振治疗头、治疗头连接线、电源线、应用软件组成	由主机、磁振治疗头、旋磁振治疗头、治疗头连接线、电源线、应用软件组成	无偏离
安全类型及运行模式	I类BF型, 连续运行	I类BF型	无偏离
操作界面	按键操作	按键操作	无偏离
定时功能	1~30min可调, 步进 1min, 初始值为20min	20min	正偏离
开机自检功能	具有声音和LED灯闪烁的变化进行自检	/	正偏离
同步功能	两治疗头可以同步治疗	两治疗头可以同步治疗	无偏离
暂停功能	治疗期间可暂停	治疗期间可暂停	无偏离

产 品 对 比

优势分析：

1.功率消耗：我们的 $\leq 48\text{VA}$ ，仁惠 $\leq 58\text{VA}$ ，（参数三角项）。

2.定时功能：

- 机器治疗时间，我们的为1-30分钟可调，步进1分钟。初始值默认为20分钟。方便进行时间调节，或是突发情况后继续治疗。还可作为锁标项。
- 仁惠治疗时间为20分钟，固定值不可调。

3.开机自检功能：我们有声音和LED灯闪烁变化，仁惠无。可作为锁标项。

产 品 对 比

腹部治疗头技术参数	XSCX- I	RHY-ZX-IIIIB/立式(普通版)	偏离情况
治疗模式	不少于3种治疗模式	不可调	正偏离
振动频率和振幅	振动频率为 $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$ ；振幅 $\geq 0.2\text{mm}$	$50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$ ；振幅 $\geq 1\text{mm}$	正偏离
磁场强度	振动片表面中心区域（圆心周围） 10mm内的磁场最强点，磁场强度为 $180\text{mT} \pm 50\text{mT}$	振动片表面中心区域（圆心周围） 10mm内的磁场最强点，磁场强度为 $180\text{mT} \pm 50\text{mT}$	无偏离
温升	常温下连续工作20min，表面温度不大于 41°C	常温下连续工作20min，表面温度不大于 41°C	无偏离

优势分析：

1.治疗模式：

- 我们有三种不同的治疗模式可选。于患者而言可以更有针对性，可以为患者选择更适合的治疗模式，且为锁标项。
- 仁惠为一种固定模式。

2.振幅问题：

- 我们的振幅为0.2mm左右，仁惠为1mm左右。
- 仁惠的振幅数值上比我们的大，但研发做了等效实验，结果反馈为：对于深部治疗来讲，两个振幅大小治疗效果近乎一样。且我们内部进行了5分钟试验比对（女生腹部），绝大多数认为我公司的腹部治疗头更加温和，体感更舒适。

产 品 对 比

腔内治疗头技术参数	XSCX- I	RHY-ZX-IIIIB/立式(普通版)	偏离情况
治疗模式	不少于3种治疗模式	不可调	正偏离
磁场强度	静止状态下距顶端5mm周围（紧贴外壳表面）的磁场最强点，磁场强度为30mT ± 5mT	静止状态下距顶端5mm周围（紧贴外壳表面）的磁场最强点，磁场强度为30mT ± 5mT	无偏离

优势分析：

1.关于治疗模式：

- 我们有三种不同的治疗模式可选。且可作为锁标项。
- 仁惠为一种固定模式。

● 产品详情

同类产品对比

注册人名称	南京麦澜德/苏州拾锦/四川千里信益康等	太原梓豪健康产品研究所(有限公司)	延边亿方实业有限公司
注册证编号	苏械注准20212091710 苏械注准20252090226 川械注准20252090013	晋械注准20172090037	吉械注准20222180312
产品名称	盆底康复仪/盆底肌治疗仪/盆底康复治疗仪	红外盆腔治疗仪	宫颈糜烂与盆腔炎治疗仪
类别	II类	II类	II类
型号规格	MLD HA10、MLD HA10S、MLD HA20、MLD HA20S 、MLD HA30、MLD HA30S SP1、SP2、SP3 S6、S8、S10、S12、S12 Pro、S16、S16 Pro	A、B、C	GP-5A型、GP-5B型、GP-5C型、GP-5D型
结构及组成/主要组成成分	由主机、软件（发布版本V1）、阴道电极、理疗用体表电极、压力探头、充电线、电极线等组成	该仪器分A、B、C三种型号。A型由控制器和理疗包组成；B型由控制器、治疗包和理疗包组成；C型由控制器、治疗包、理疗包和锂电池组成	产品由主机和应用部分组成
预期用途	对患者盆底的压力信号进行采集、分析、评估，通过压力生物反馈、神经肌肉电刺激进行盆底功能障碍的治疗。产后盆底功能康复治疗（包含腹直肌分离治疗），提升盆底肌肉健康状态；治疗轻度、中度压力性尿失禁、以压力性尿失禁为主的混合性尿失禁；便秘的辅助治疗；治疗盆腔器官脱垂（含I度、II度阴道前后壁膨出，I度、II度子宫脱垂）；慢性盆腔疼痛的缓解，慢性盆腔炎的辅助治疗；治疗阴道松弛症，增强阴道收缩功能，阴道痉挛的辅助治疗，刺激细胞恢复功能，促进产后阴道复旧，提高局部机能，提高女性性功能指数，治疗女性性功能障碍	适用于慢性盆腔炎、附件炎的辅助治疗	慢性盆腔炎、慢性宫颈炎、尖锐湿疣
产品图片			


PART

03

装机及操作视频


● 装机及操作视频

装机视频



● 装机及操作视频

操作视频



PART

04



其他相关内容

- 配置清单
- 产品文献
- 收费建议

永磁旋振治疗仪 XSCX-I 配置清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	主机	<u>XSCX-I</u>	台	1	
2	电源线	-	条	1	
3	熔断器	-	个	1	
4	治疗头连接线	-	条	2	
5	磁振治疗头	-	个	1	含 3 个治疗头
6	旋磁振治疗头	-	个	1	
7	台车	-	个	1	
8	企业资质	-	套	1	
9	合格证	-	个	1	
10	说明书	-	份	1	
11	用户验收单	-	份	1	
12	保修卡	-	份	1	

永磁旋振治疗仪联合头孢呋辛钠与甲硝唑治疗盆腔炎的效果分析

黄 锦¹, 杨 萍^{2*}

(贵州省贵阳市花溪区人民医院, 贵州 贵阳 550025)

[摘 要] 目的: 探究永磁旋振治疗仪联合头孢呋辛钠与甲硝唑治疗盆腔炎的临床效果。方法: 选取 2022 年 1 月至 2024 年 1 月贵州省贵阳市花溪区人民医院收治的 60 例盆腔炎患者开展研究, 按照随机数字表法分为对照组 ($n=30$, 予以头孢呋辛钠、甲硝唑联合治疗) 和观察组 ($n=30$, 予以头孢呋辛钠、甲硝唑、永磁旋振治疗仪联合治疗), 比较两组的疗效及各项临床指标。结果: 观察组治疗总有效率较对照组高 ($P < 0.05$)。治疗后, 两组血清 C 反应蛋白 (CRP)、肿瘤坏死因子- α (TNF- α) 水平均较治疗前降低, 血清白细胞介素-6 (IL-6) 水平均较治疗前升高, 且观察组血清 CRP、TNF- α 水平均较对照组低, 血清 IL-6 水平较对照组高 ($P < 0.05$)。与对照组比较, 观察组下腹疼痛、下腹坠胀、腰骶部酸痛改善时间均更短 ($P < 0.05$)。两组不良反应发生率相比差异不显著 ($P > 0.05$)。随访 3 个月, 观察组病情复发率低于对照组 ($P < 0.05$)。结论: 永磁旋振治疗仪联合头孢呋辛钠与甲硝唑治疗盆腔炎临床疗效显著, 能够减轻机体的炎症反应, 缓解临床症状, 且疾病复发率低、不良反应少, 安全有效, 具有较高的临床应用价值。

● 产品收费



谢谢观看

T H A N K Y O U