



Body surface electrodes for
nerve and muscle stimulators

神经和肌肉刺激器用 体表电极



广州圆医生物科技有限公司

Guangzhou Yuanyi Biotechnology Co., Ltd

服务热线: 020-84215664

公司地址: 广东省广州市天河区华夏路28号富力·盈信大厦20楼

全国总代理: 广州圆爱康生物科技有限公司

广州圆医生物科技有限公司

神经和肌肉刺激器用体表电极介绍

圆医神经和肌肉刺激器用体表电极(理疗电极片)具有导电性极佳,柔软性好,粘性好,无过敏,可反复使用等特点,全部采用环保材料。可用于颈部、腰部、腿部等身体其他部位。

产品用途

与中低频理疗仪配套使用,用于传导仪器发出的电脉冲信号。

产品组成

主要由导电硅胶、骨网状无纺布、导电薄膜、导线组成。

产品使用


- 1、将电极片与导线连接上。使用前请将被粘贴部位皮肤湿润和清洁。
- 2、将电极片附到需治疗的部位或相应的穴位并压紧。
- 3、治疗结束后,将电极与线分开。
- 4、使用过程中如有刺痛感时,可用清水清洗表面。

注意事项


- 1、本产品粘接面应保持清洁,避免沾上灰尘、油性物、粘性物,否则粘性会下降。
- 2、请把理疗电极片粘贴在存放板上进行保存,不要任意贴放在其他物品上,避免损伤理疗电极片。
- 3、理疗电极片因脏污而使粘性下降时或对皮肤有刺痛感时,用少量水清洗可暂时恢复其粘性。但用水过多反而会使粘性下降。请勿频繁清洗,请勿使用清洁剂、热水等。
- 4、对产品过敏者、皮肤创伤处禁用,如出现红疹、水泡应立即停止使用。



长方形电极片

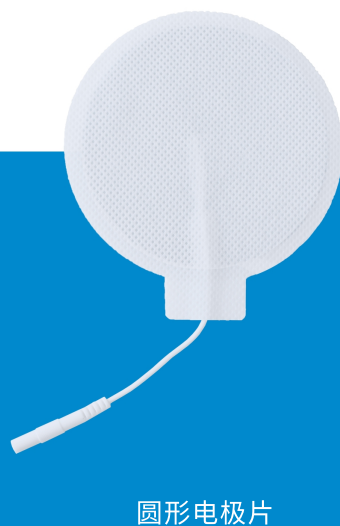

圆形电极片

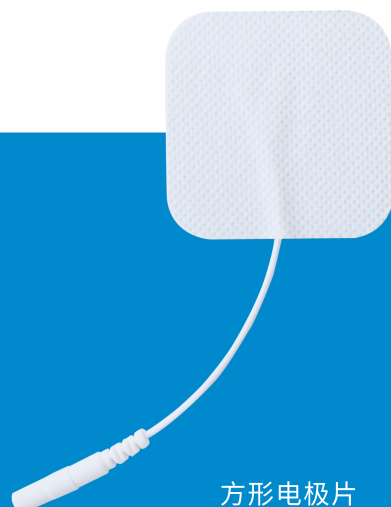

方形电极片




丰胸电极片



长条形电极片


01
丰胸电极片

应用项目 PROJECT

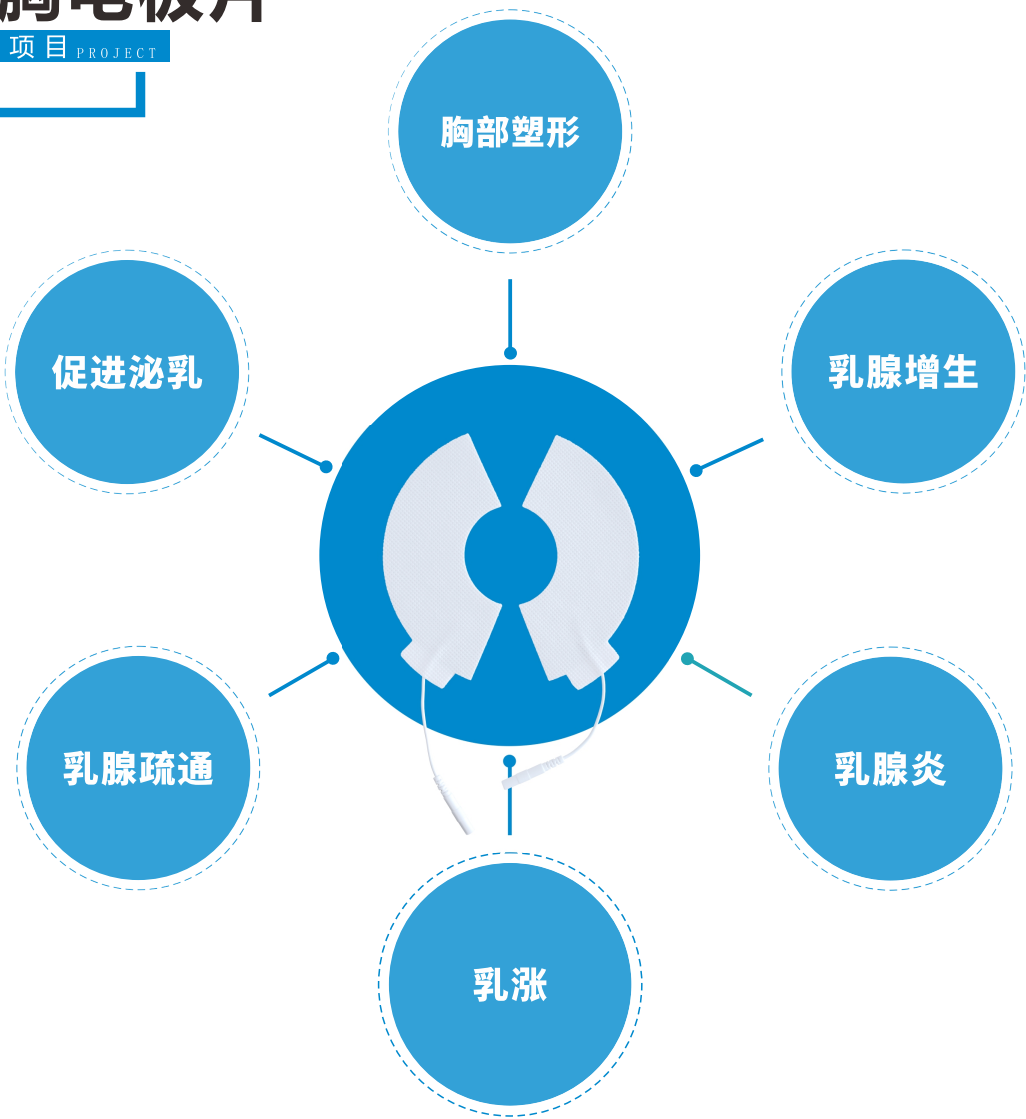

02
圆形电极片

应用项目 PROJECT

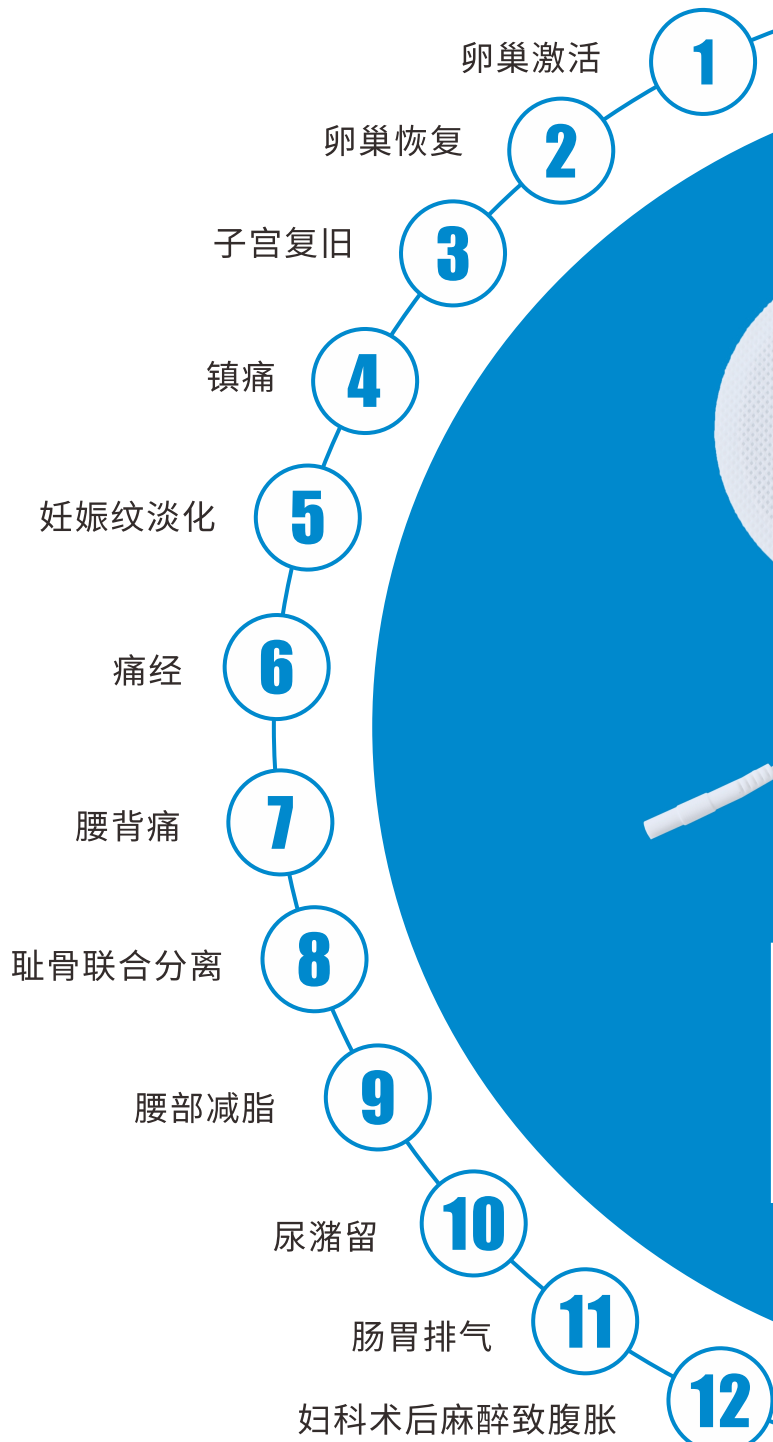


腹直肌分离(神经肌肉电刺激) |

腹直肌分离(肌电触发电刺激) |


03
长条形电极片

应用项目 PROJECT

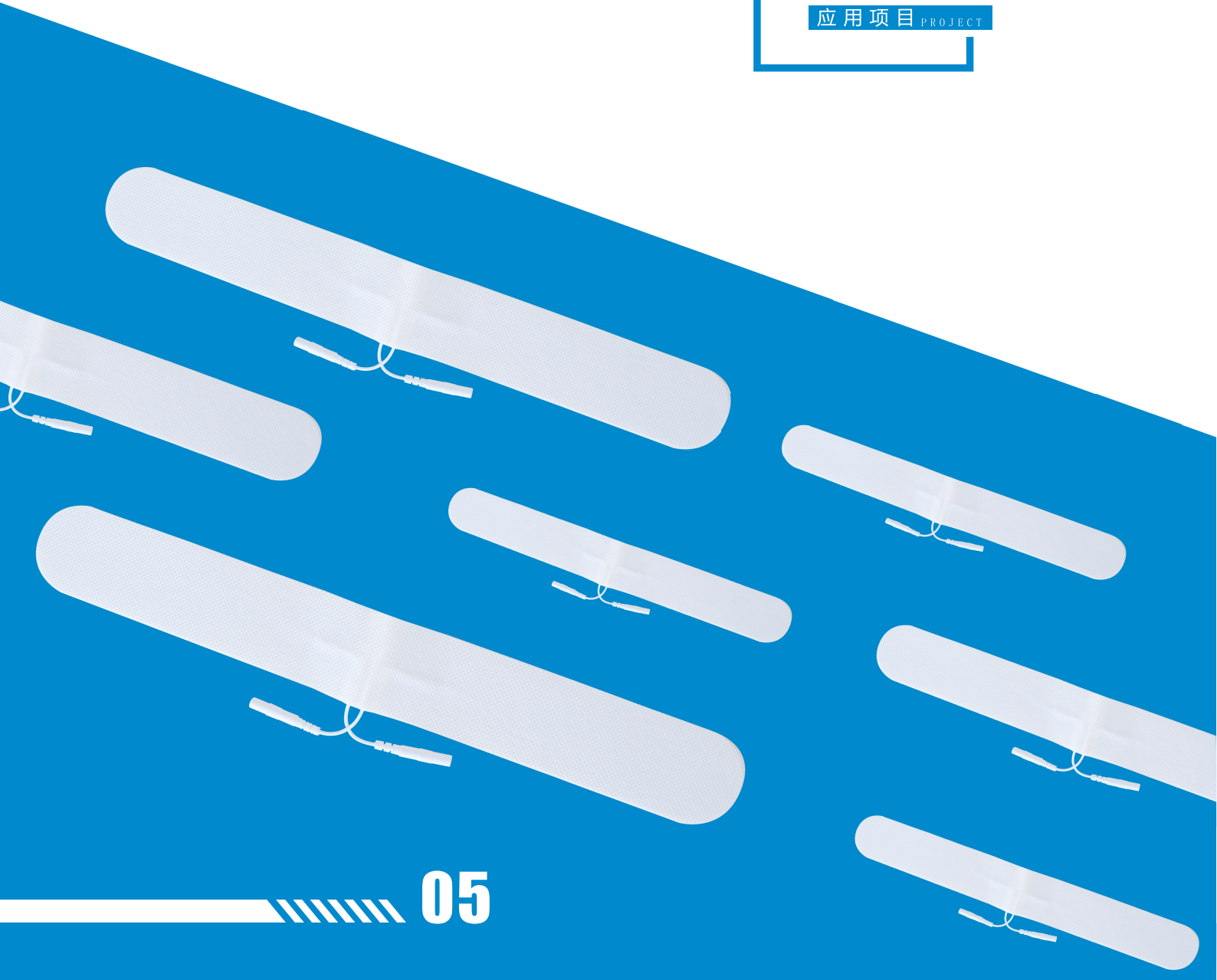

04
长方形电极片


应用项目 PROJECT

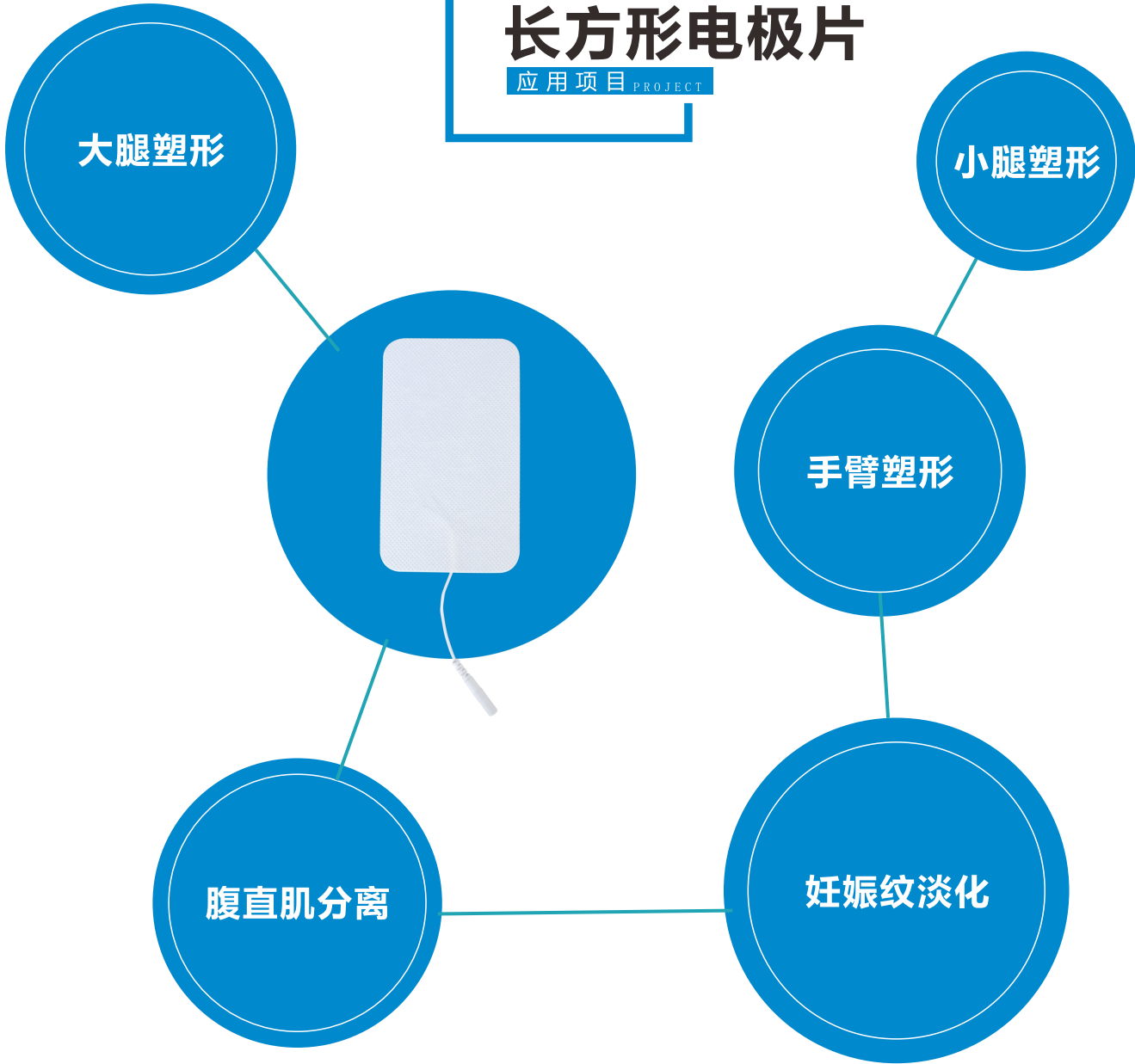

05

方形电极片

应用项目 PROJECT

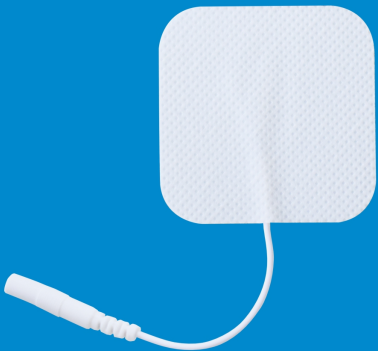

腹横肌
训练

腹斜肌
训练

肩颈调理

痛经

肌肉酸痛

耻骨联合分离

子宫内膜增厚

慢性盆腔炎

人流术后
子宫恢复

人流术后
月经过少

盆腔内环境
调理

盆腔保养

备孕期应用项目




不孕不育调理

卵巢激活
卵巢恢复




子宫内膜薄

子宫内膜增厚

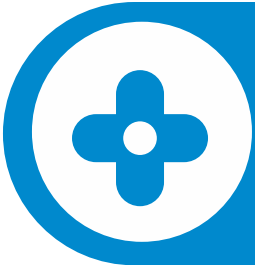


月经调理

痛经

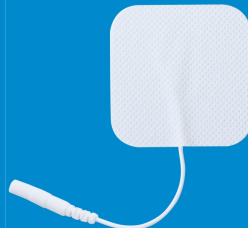


盆腔内环境

慢性盆腔炎
盆腔内环境调理
盆腔保养

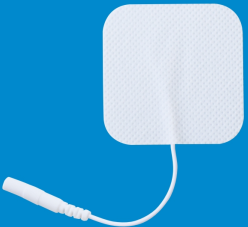

顺产康复时间-项目对照表

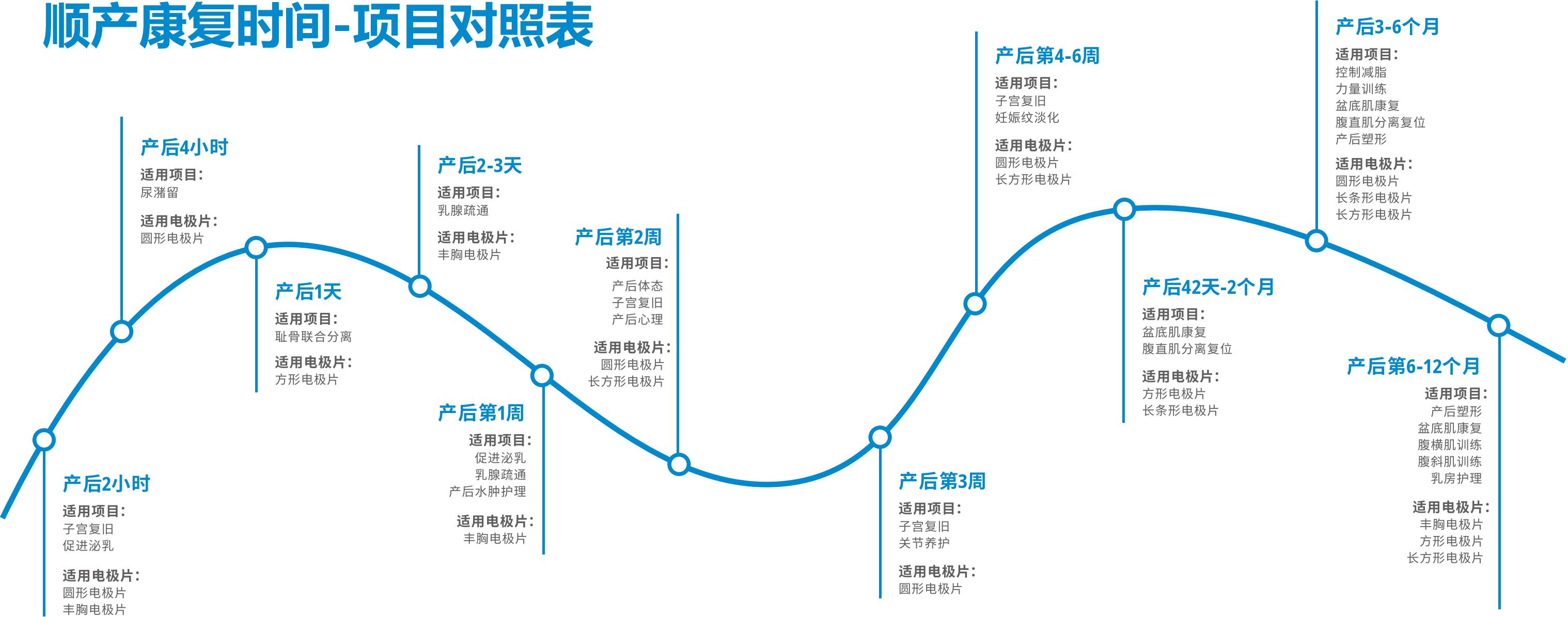

剖宫产康复时间-项目对照表

